


CANULA DUALBORE SIDEFLO

REFERENCIA:	MO-3423	23G
	MO-3425	25G
	MO-3427	27G

MARCA: MEDONE

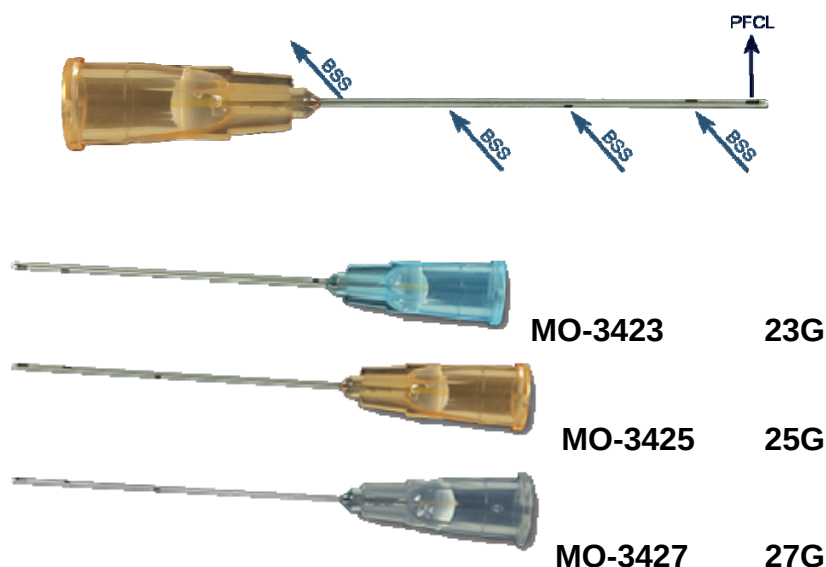

Descripción: Cánula diseñada para incrementar la seguridad, al disponer de un puerto lateral para inyectar fluido, eliminando así las posibles lesiones retinianas causadas por un gran flujo de fluido. Dispone de varios orificios de salida, para permitir doblar el flujo de salida, y conseguir disminuir rápidamente la presión durante la inyección.

El exterior de la cánula es totalmente metálico, lo que permite una fácil entrada a través de sistemas de cánula con válvula. Este diseño de MedOne disminuye las burbujas de aire durante la inyección de perfluorocarbono y así poder terminar la inyección sin interrupción.

Indicada para la inyección de perfluorocarbono, colorantes, u otros líquidos en cirugía de vitrectomía.

Medidas: Longitud de las cánulas 32mm. Diámetro de 0,6mm (23G); 0,5 mm (25G) y 0,4 mm (27G).

Estéril.

Presentación: Caja 5 unidades

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de Abril del 2015, Rev.1